


Attends® Slip Active



Attends - de oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Slip Active, het all-in-one product voor zware urine en ontlastingsincontinentie met het unieke fixatiesysteem

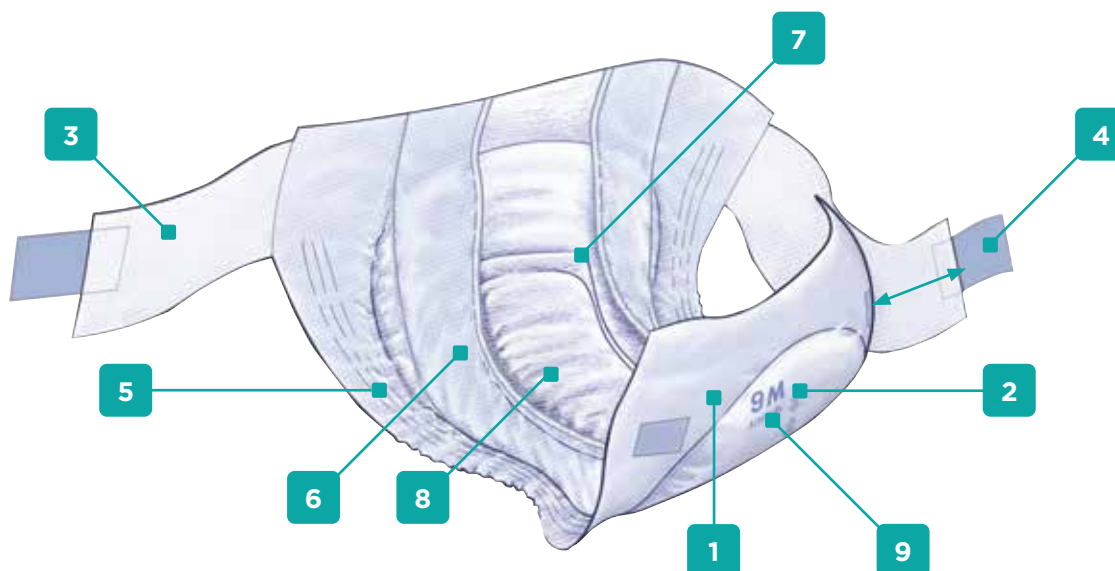

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Een discreet witte en waterdichte buitenlaag zorgt voor maximale veiligheid. | 2 Een vochtindicator geeft aan wanneer het product verschoond moet worden en helpt tevens het product op de juiste manier aan te leggen. | 3 Luchtdoorlatende textiele heupbanden voor extra comfort rondom het middel zorgen naast een perfecte pasvorm ook voor het behoud van een gezonde huid. |
| 4 Hersluitbaar 2 stappen fixatiesysteem. Fixeer eerst de flexibele heupbanden aan de klittenbandstrip, verplaats indien nodig en sluit dan met de plakstrips zodat de slip goed op zijn plaats blijft. | 5 Goed aansluitende beenopening voor optimale pasvorm en extra veiligheid. | 6 Doorlopende anti-lekrandjes zodat vocht veilig wordt ingesloten. |
| 7 Anatomisch gevormde absorptiekern voor een perfecte aansluiting op het lichaam. | 8 Een Superabsorberende dubbele kern zorgt voor maximale veiligheid tegen doorlekken, het behoud van een comfortabel droge huid en Natuurlijke Geurbescherming. | 9 De productmaat en het absorptie niveau staat discreet vermeld op de achterzijde zodat deze eenvoudig kan worden herkend. |

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

Absorptie / Grootte

		Verpakkingsinhoud Doosinhoud	EAN 7332152 Zak / Doos	Heup / Middel omvang (cm)	Materiaal buitenlaag	Materiaal absorptiekern	Materiaal bovenlaag	Ademend	Elastiek	Anti-lekrandjes	Hersluitbaar fixatie systeem	Natuurlijke Geurbescherming	Quick-Dry Technologie
8	Attends Slip Active Medium 	28 4	200728 200735	75 - 110	Polyethyleen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende poly- meer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	Ja - Heup- banden	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201329 201336	100 - 145	Polyethyleen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende poly- meer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	Ja - Heup- banden	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Slip Active Medium 	28 4	201503 201510	75 - 110	Polyethyleen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende poly- meer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	Ja - Heup- banden	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201381 201398	100 - 145	Polyethyleen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende poly- meer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	Ja - Heup- banden	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium 	28 4	201404 201411	75 - 110	Polyethyleen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende poly- meer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	Ja - Heup- banden	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 2	201428 201435	100 - 145	Polyethyleen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende poly- meer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	Ja - Heup- banden	✓	✓	✓	✓	✓


Quick-Dry

Quick-Dry is de aqisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.


pH waarde

De kerntechnologie met absorptielaag bestaande uit krulvormige vezels garandeert een lage pH waarde die gelijkwaardig is aan de pH waarde van de huid. Dit beschermt en draagt bij aan de huidgezondheid.


Actieve Zone

De Actieve Zone bevindt zich in de kern van het product en garandeert een hoge absorptiecapaciteit daar waar het daadwerkelijk nodig is. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en zorgt voor extra veiligheid tegen doorlekken.



Attends Slips zijn getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.


Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.